

Platform3 plug-in function

“Store Mean value to .Results”


2008/07/29

# 機能

- 任意の期間の平均値をhdata.Resultsに追加する。
- Continuous, Blockに適用可能
- 構造体には、  
hdata.Results.MV.Oxy  
または  
hdata.Results.MV.Oxy.block1  
のように追加される。

# パラメータ入力

- パラメータは平均する期間の開始時刻と終了時刻を秒で入力する。
- “0.0”はデータ開始時刻を意味する。刺激開始のオンセットではない。

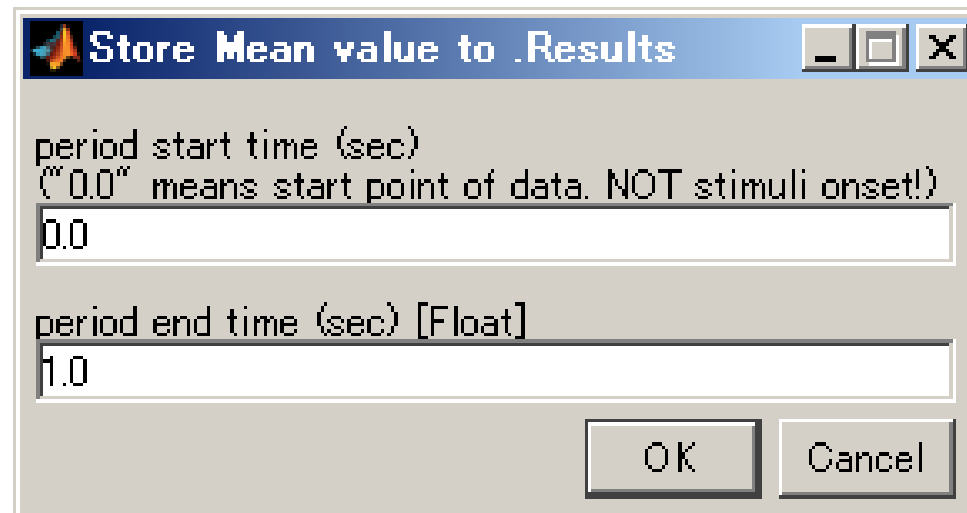

The image shows a screenshot of a software dialog box titled "Store Mean value to .Results". The dialog box has a standard Windows-style title bar with minimize, maximize, and close buttons. Inside the dialog, there are two text input fields. The first field is labeled "period start time (sec)" with a sub-note in parentheses: " ("0.0" means start point of data. NOT stimuli onset!)". The value "0.0" is entered in this field. The second field is labeled "period end time (sec) [Float]" and the value "1.0" is entered. At the bottom right of the dialog, there are two buttons: "OK" and "Cancel".

Field Label	Value
period start time (sec) ("0.0" means start point of data. NOT stimuli onset!)	0.0
period end time (sec) [Float]	1.0

# Blockデータでの利用時の注意

- 関数追加の直後は、解析レシピ内のContinuousの位置に追加される。
- 解析レシピ操作ボタンの「Down」を押し、「Blocking」以降に追加した関数を移動する必要がある。